

铝模块消化系统


配置丰富，选型灵活

格哈特升级了享誉全球的凯道森（KJELDATHERM）模块消化系统。

凯道森产品线是专业的高精度程序控制凯氏消化系统，适用于100ml、250ml或400ml消化管，根据样品处理量的不同，有8位、20位和40位系统可供选择。

凯氏消化系统的部件非常容易配置，可完美融入您每天的实验工作中。

凯道森用于凯氏消化，不仅直接与蒸馏仪配套组成凯氏定氮仪，还可与FIA / SFA等流动分析仪配套；也用于多指标联合消化，或者扩展做重金属、COD等的标准消化等。

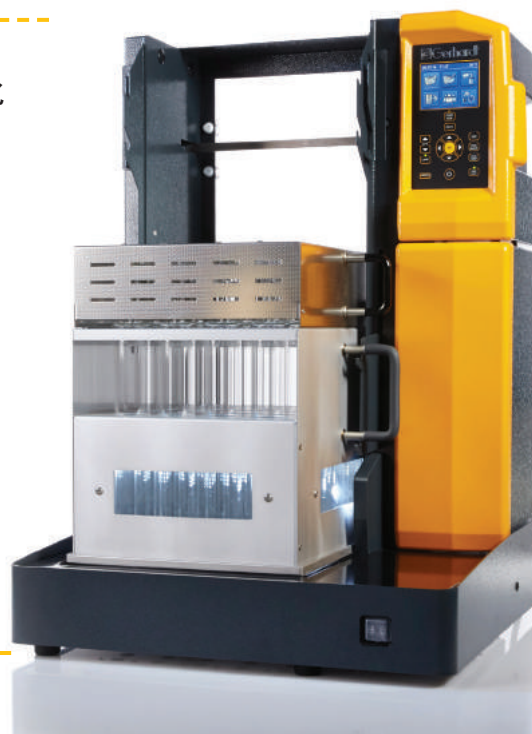

精确的温度控制系统

- + 控温精度 $\pm 0.5\%$
- + 有99个程序，每个程序可设定40步加热梯度
- + 内置30个预设方法
- + 加热速度可调……

高品质的部件

- + 具有最优能量利用率和高效全包围隔热的铝制消化模块
- + 瓷釉耐酸表面
- + 优质的Duran®玻璃制的样品试管和排废装置
- + 超级防腐蚀的外壳……

安全的性能


- + 隔热手柄
- + 用于收集残留酸液的滴盘
- + 可设置安全温度
- + 声光错误警告
- + 自动开关的排废气设备
- + 过热保护……

便利的功能

- + 照亮消化区域
- + 可预热消化模块的预热功能
- + KT-L系列具有自动升降功能
- + 试管架具有带编号的样品位
- + 标准化的消化条件
- + 齐全的零配件……

专注于认证的实验室

- + 照明和侧窗设计满足了监视样品残留物这一基本需求
- + 具有密码保护功能
- + 可设置不同访问权限的用户级别
- + 保存多达30个包含温度、日期和时间的消化过程
- + 数据可导出至LIMS
- + 满足ISO 17025, GLP等规范的要求
- + 适用于提供符合（诸如DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, EU指令, APHA, Ph.Eur（欧洲药典）. 2.5.33（第7法, A步骤）等）标准的结果

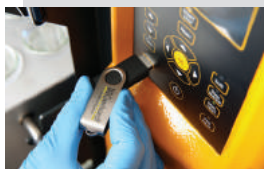

KT/KT-L型凯道森KJELDATHERM

附件齐全

大量可选的试管和试管架

不同大小和式样的消化管和试管架可用于每一种可想象的应用，成倍的拓展了可用性。

- + 消化管：250/300ml, 100ml和400ml
- + 试管架：8位, 20位, 40位


KJELCAT凯氏片状催化剂

适用于各种各样应用的高效催化片，与格哈特消化设备完美匹配，可提供1000片装的。

- + 凯氏催化片系列，有Se型, Cu型, Cu/Ti型或者轻Cu型等
- + 消泡片，用于发泡严重的样品

TURBOSOG特博松

紧凑型涤气系统，用于收集和中和腐蚀性酸雾。

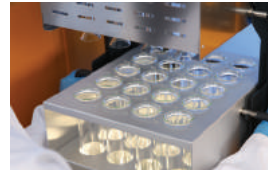

型号概述

凯道森 (KJELDATHERM®) KT-L (带升降功能)

带有程序控制器的模块消解系统具有数据管理、照亮消化区域、预热等功能

型号	加热位	消化管尺寸	最大温度	尺寸 (宽/深/高)	重量	订货号 *
KT-L 8s	8	250/300ml	430°C	515/483/748mm	约44kg	12-0704
KT-L 8s-BS	8	400ml	430°C	515/483/748mm	约44kg	12-0706
KT-L 20s	20	250/300ml	430°C	515/483/748mm	约53kg	12-0729
KT-L 20s-BS	20	400ml	430°C	515/483/748mm	约53kg	12-0731
KT-L 40s	40	100ml	430°C	515/483/748mm	约53kg	12-0745

* 230V电压版本，特殊电压可按需提供

凯道森 (KJELDATHERM) KT (无升降功能)

带有程序控制器的模块消解系统具有数据管理、预热等功能

型号	加热位	消化管尺寸	最大温度	尺寸 (宽/深/高)	重量	订货号 *
KT 8s	8	250/300ml	430°C	515/483/728mm	约31kg	12-0700
KT 8s-BS	8	400ml	430°C	515/483/728mm	约31kg	12-0702
KT 20s	20	250/300ml	430°C	515/483/728mm	约40kg	12-0725
KT 20s-BS	20	400ml	430°C	515/483/728mm	约40kg	12-0727
KT 40s	40	100ml	430°C	515/483/728mm	约40kg	12-0743

* 230V电压版本，特殊电压可按需提供

有关各种具体型号的设备及其附件和耗材的详细技术数据和订购信息，请向我们索要凯道森产品数据表。

Since 1846
C. Gerhardt



EN ISO
9001:2015

Gafta 会员

经销商

Gerhardt
Analytical Systems

Gerhardt China - 中国格哈特
广州市天河区金颖路66号资源与环境研究所2楼
邮编：510635
电话：+86 20 38921904
传真：400 8266 163转65577
E-mail：ght@cgerhardt.net
Web：www.cgerhardt.net
www.格哈特.com
www.gerhardt.de

服务热线
4008-939-018



微信公众号



公司名片

资料仅供参考，随时可能修改，请联系业务人员确认！